


Correzione automatica della temperatura

Dipendenze dalla temperatura nella dosimetria

La dipendenza dalla temperatura intrinseca nei rilevatori dosimetrici ha un impatto diretto sui risultati delle misurazioni e rappresenta quindi una sfida per l'accuratezza della dosimetria. I metodi di correzione tradizionali basati su letture in un unico punto potrebbero non fornire un quadro completo delle variazioni di temperatura all'interno del fantoccio.

La nostra soluzione? Correzioni automatiche della temperatura


Il Delta4 Phantom+ offre la possibilità unica di monitorare la temperatura di ciascun rilevatore individualmente in tempo reale. Ciò garantisce che vengano prese in considerazione le condizioni effettive, riducendo al minimo il rischio di imprecisioni.

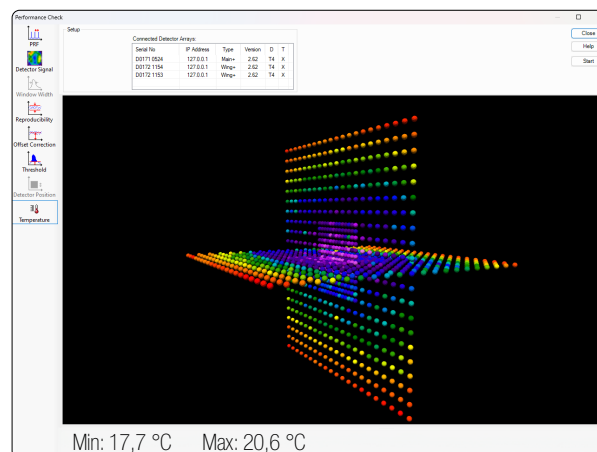


Variazioni di temperatura nei rilevatori

Monitoraggio individuale della temperatura dei rilevatori

Integrando il monitoraggio della temperatura in ciascun punto di misurazione, il nostro sistema offre una precisione senza pari senza la necessità di misurazioni esterne della temperatura o periodi di attesa. Grazie a questa funzione, potete fidarvi dell'affidabilità dei vostri dati dosimetrici.

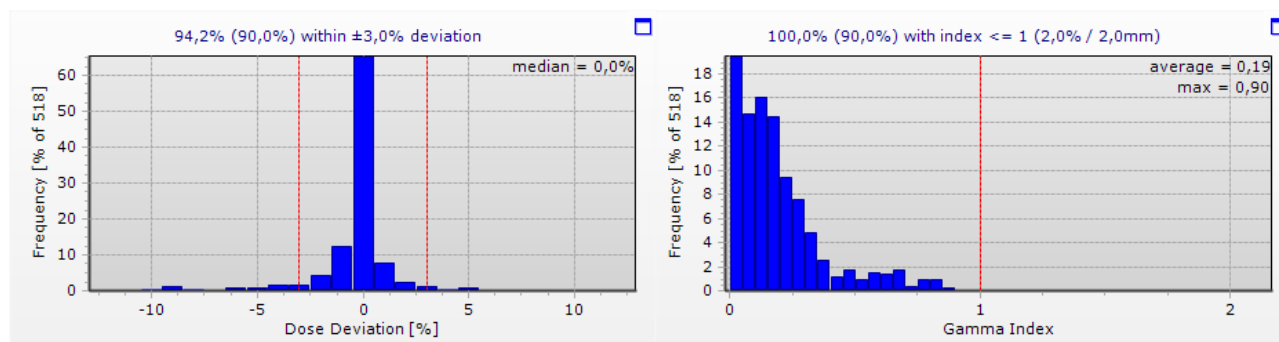

Risultati con monitoraggio della temperatura

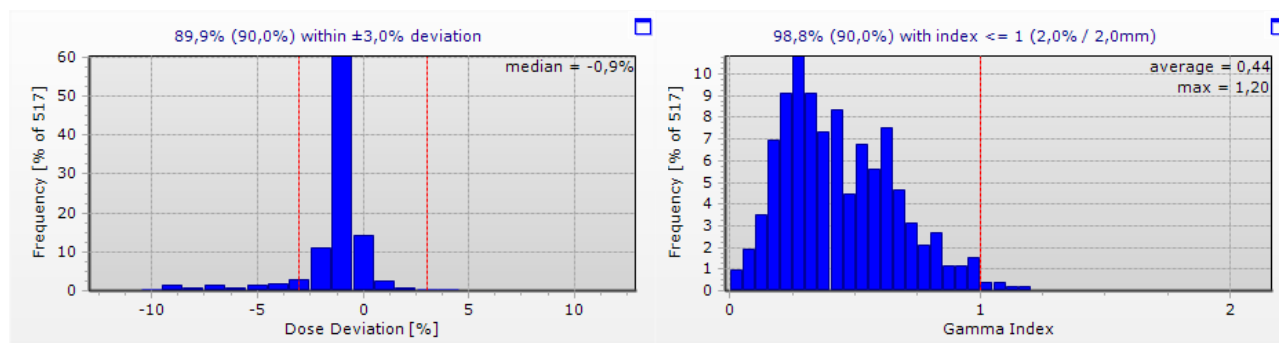

Risultati senza monitoraggio della temperatura (la differenza di temperatura è di 3 °C)

La funzione di correzioni automatiche della temperatura richiede un contratto di assistenza software e hardware aggiornato o un aggiornamento acquistato. Non disponibile per tutti i sistemi. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante Scandidos.

Assistenza completa e aggiornamenti regolari

Noi di ScandiDos ci impegniamo a fornire ai nostri clienti il massimo livello di assistenza e supporto, e i nostri contratti di manutenzione riflettono questo impegno.

Con i nostri contratti di manutenzione, potete stare certi che il nostro team vi assisterà in ogni fase del processo. Che si tratti di manutenzione ordinaria o di problemi imprevisti, lavoreremo con voi per trovare la soluzione migliore e rimettere in funzione le vostre apparecchiature il più rapidamente possibile, senza costi aggiuntivi.



PROVATE LA TRANQUILLITÀ - ORDINATE OGGI IL VOSTRO CONTRATTO DI ASSISTENZA

Corporate Headquarters ScandiDos AB (publ)
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala, Sweden
+46 18 472 3030
info@scandidos.com
delta4family.com



© Copyright ScandiDos AB

Distributor Dosimetrica di Nicola Franza
Via Siniscalchi 44, cap 84014
Nocera Inferiore , (SA) Italia
0039 3480562148
info@dosimetrica.com
www.dosimetrica.com

